

دستورالعمل استفاده از فیزیوجکت™ (ابزار دارورسان خودکار)

CERTIFIED
EU GMP

شرکت سیناژن
CinnaGen

CinnoRA®

Adalimumab

Physioject™ 40 mg/0.8 ml




شرایط نگهداری

- در صورت مشاهده شکستگی یا ترک، از دارو استفاده نکنید.



- بهتر است همیشه فیزیوجکت™ را در بسته‌بندی اصلی دارو نگهداری کنید.

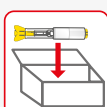


- فیزیوجکت™ را گرم نکنید و از فریزکردن آن جداً خودداری نمایید.



- قبل از مصرف، تاریخ انقضای درج‌شده روی فیزیوجکت™ را بررسی کنید.



- فیزیوجکت™ را داخل یخچال در دمای ۲-۸ درجه سانتی‌گراد و دور از دید و دسترس کودکان نگه دارید.

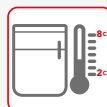

- از قراردادن فیزیوجکت™ در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کنید.



- هر فیزیوجکت™ برای تزریق یک دوز دارو است و تنها برای یک بار تزریق قابل‌استفاده است.



- از تکان‌دادن شدید فیزیوجکت™ خودداری کنید.



آمادگی پیش از تزریق




- دست‌های خود را به‌خوبی با آب و صابون بشویید.



- فیزیوجکت™ را از یخچال خارج کرده و ۱۵ الی ۳۰ دقیقه صبر کنید تا با محیط هم‌دما شود.

انتخاب محل تزریق

- نواحی مناسب برای تزریق عبارت‌اند از: جلوی ران و ناحیه شکم با فاصله ۵ سانتی‌متر از ناف.

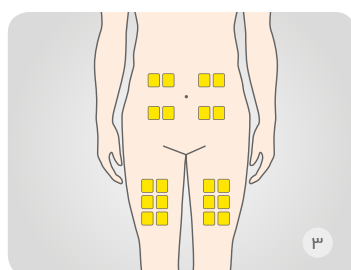

- در هر بار تزریق، بخش متفاوتی از نواحی ذکر شده را انتخاب کنید.
- تزریق نباید در قسمت‌هایی از پوست که سفت، کبود، قرمز، دردناک یا دارای پلاک‌های پسوریازیس است، انجام شود.

مراحل تزریق



- محل تزریق را با پنبه الکلی به‌صورت دورانی از مرکز به خارج ضدعفونی کنید.

- اجازه دهید الکل با جریان هوا خشک شود.
- از فوت‌کردن محل تزریق خودداری نمایید.


- قسمت نگهدارنده فیزیوجکت™ را طبق تصویر با دست نگه دارید و از دست دیگر خود برای برداشتن درپوش دستگاه استفاده کنید.

- درپوش دستگاه را به صورت مستقیم از روی دستگاه برداشته و از پیچاندن آن خودداری کنید.





۶ فیزیوجکت™ را با یک دست گرفته و با دست دیگر برآمدگی کوچکی در محل موردنظر برای تزریق ایجاد کنید.

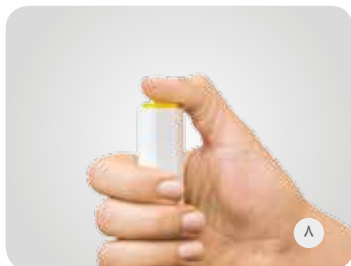

۸ دکمه فوقانی زردرنگ بالای دستگاه را با انگشت شست فشار دهید و دستگاه را تا پایان تزریق با فشار مناسب و با اطمینان از خارج نشدن سوزن، همان جا نگه دارید.



۷ سر متحرک دستگاه را با زاویه ۹۰ درجه به صورت عمودی تا حدی روی پوست فشار دهید که قسمت شفاف دستگاه کاملاً فشرده شود.

- تا زمانی که فشار مناسب به پوست اعمال نشود، دستگاه عمل نمی‌کند.



۱۰ روند تزریق را از طریق قسمت شفاف دستگاه کنترل کنید تا مطمئن شوید دارو به طور کامل تزریق شده است، سپس دستگاه را با یک حرکت مستقیم از محل تزریق خارج کنید.



۹ با شنیده شدن صدای کلیک، تزریق شما آغاز می‌شود و ۱۰ ثانیه به طول می‌انجامد.

- توجه داشته باشید که اعمال فشار روی پوست هیچ‌گونه تأثیری بر میزان درد تزریق ندارد؛ از این جهت نگران نباشید.

مراحل پس از تزریق

۱۱ پس از اتمام تزریق، محل تزریق را با پنبه خشک بپوشانید.

- خروج مختصری خون یا دارو از محل تزریق نگران‌کننده نیست و به سادگی با فشار پنبه یا گاز متوقف می‌شود.
- از ماساژ دادن محل تزریق خودداری کنید.
- تزریق زیرجلدی ممکن است باعث درد زودگذر یا کبودی خفیف در ناحیه تزریق شود.





۱۲ دستگاه استفاده شده را دور بیندازید.

در صورتی که به هر دلیل، تزریق با موفقیت انجام نشد، در اسرع وقت با پزشک معالج، داروساز یا واحد ارکیدلایف به شماره ۰۲۱۴۲۵۹۳ تماس حاصل فرمایید. به یاد داشته باشید این دستگاه به منظور تزریق راحت توسط خودتان، طراحی شده است؛ اما برای تزریق بار اول، آموزش‌های لازم را از پزشک، داروساز یا پرستار خود درخواست کنید. همچنین می‌توانید برای آموزش رایگان تزریق، به یکی از مراکز ارکیدلایف مراجعه فرمایید.

هنگام برداشتن درپوش زردرنگ فیزیوجکت™، از هرگونه پیچش درپوش اکیداً خودداری کنید. کوچکترین پیچش و انحراف، منجر به خرابی فیزیوجکت™ می‌شود.

درپوش زردرنگ باید کاملاً مستقیم و بدون پیچاندن، کشیده شود.

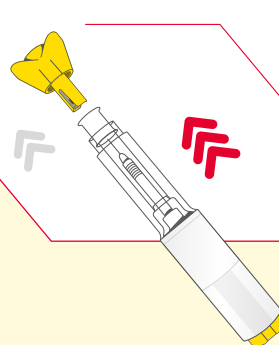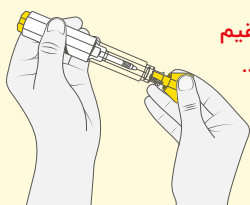

توجه
توجه